


## SNABBLYFT X



## SNABBLYFT



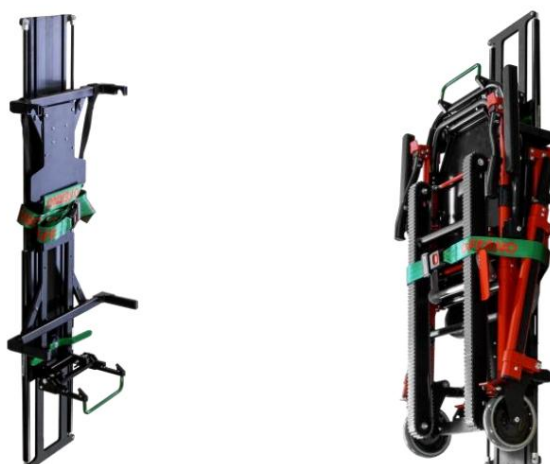

*TIP: Regular cleaning helps reduce the risk of transmitting disease and enables the equipment to function at its optimum.*

#### Ansvarsfriskrivning

Denna manual innehåller allmänna instruktioner för användning, drift och skötsel av FAST-LIFT, FAST-LIFT X. Säker och korrekt användning av FAST-LIFT, FAST-LIFT X är användarens eget ansvar.

Säkerhetsinformation tillhandahålls som en service till användaren. Alla andra säkerhetsåtgärder ska följa gällande föreskrifter.

Det rekommenderas att användare får utbildning i korrekt användning av FAST-LIFT, FAST-LIFT X innan de används i en verklig situation. Spara denna manual för framtida bruk.  
hänvisning.

#### **SNABBLYFT, SNABBLYFT X**

##### **Produktspecifikation**

<b>Längd:</b>	1296 mm
<b>Bredd:</b>	468 mm
<b>Djup:</b>	SNABBLYFT X - 283 mm / SNABBLYFT - 212 mm
<b>Vikt:</b>	SNABBLYFT X - 19 kg / SNABBLYFT - 10,5 kg
<b>Belastningsgräns:</b>	30 kg

<b>Produktnummer</b>	<b>Produktnamn</b>
60-0254-001	SNABBLYFT X
60-0254-002	SNABBLYFT



## FAST-LIFT X-funktioner

- Lämplig för FAST PREMIUM-, FAST- och FST-stolar
- Ger assisterad hydraulisk lyftning (till exempel på ambulansvägg eller dörrar, eventuellt också i infällda förvaringsutrymmen)
- Med justerbar förlängning framåt/bakåt
- Säkerställer stolen säkert

## Procedur för att ta bort stolen från adaptern



Se till att FAST-LIFT X är i standardläget (Figur 1).



Lossa säkerhetsbältet och dra ut FAST-LIFT X mot dig medan du låser upp den gröna spaken som sitter på sidan av FAST-LIFT X (Figur 2).



Dra den gröna spaken mot dig och flytta FAST-LIFT X nedåt.

Flera låslägen finns tillgängliga (Figur 3).



Lås upp stolen med den gröna spaken som sitter på ovansidan av FAST-LIFT X. Dra ut stolen för användning.

Följ steg 4 till 1 i omvänd ordning (figur 4).



## Procedur för montering av stolen på FAST-LIFT X




Se till att FAST-LIFT X är i standardposition (Figur 1).



Lossa säkerhetsbältet och dra ut FAST-LIFT X mot dig medan du låser upp den gröna spaken som sitter på sidan av FAST-LIFT X (Figur 2).




Dra den gröna spaken mot dig och för FAST-LIFT X nedåt. Flera låslägen finns tillgängliga. (Figur 3).

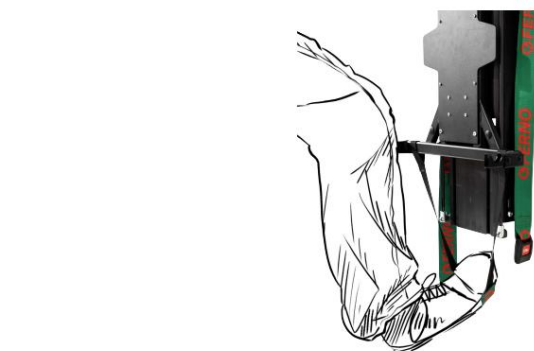

Dra FAST-LIFT X ner till önskad position; vid behov kan du hjälpa till genom att använda foten i remmen. Innan du lastar stolen, återställ remmen till sitt ursprungliga läge (Figur 4).



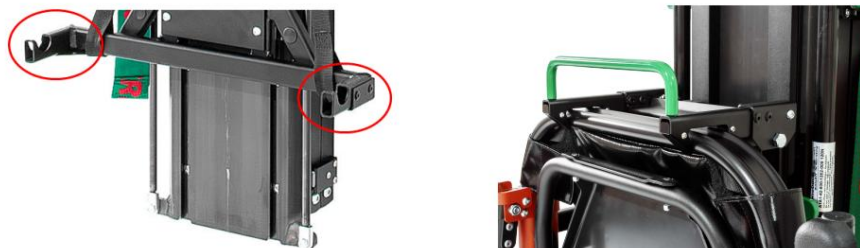

Placera stolen på FAST-LIFT X. Den nedre delen av FAST-LIFT X sätts in i låset, och i det övre läget klickar den på plats.

Använd sedan den gröna spaken på sidan av FAST-LIFT X för att lyfta stolen uppåt och trycka stolen med FAST-LIFT X på plats.

(Figur 5).



Fäst stolen med hjälp av säkerhetsbältet (Figur 6).

## FAST-LIFT-funktioner

- Lämplig för FAST PREMIUM-, FAST- och FST-stolar
- Ger assisterad hydraulisk lyftning (till exempel på ambulansvägg eller dörr)
- Säkerställer stolen säkert

Följ samma procedur för FAST-LIFT i vertikal riktning, förutom horisontell riktning.

### **[Rengöring och desinfektion]**

LAST-LIFT och FAST-LIFT X är enkla att rengöra och desinficera. Torka av alla ytor noggrant med ett lämpligt desinfektionsmedel. Följ desinfektionsmedelstillverkarens anvisningar gällande appliceringsmetod och kontaktid.

#### **Ferno Slovakien Kontakt:**

Ferno Slovakia sro Bošáca 893 913 07  
Slovakien

Mer information på: [www.fernosk.sk](http://www.fernosk.sk)

