



FWEWBLS
Ferno Walkbelt



FERNO®



Käyttäjien ohjeet

Doc. ID. 00464-V3 / toukokuu 2023

Vastuuvapauslauseke

Tämä käsikirja sisältää yleisiä ohjeita tämän tuotteen käytöstä, käytöstä ja hoidosta. Ohjeet eivät kata kaikkea. Tämän tuotteen turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän harkinnassa. Turvallisuustiedot sisältyvät palveluna käyttäjälle. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien turvatoimenpiteiden tulee olla sovellettavien määräysten ja paikallisten protokollien mukaisia ja niitä on huomioitava. Tämän tuotteen oikeaa käyttöä koskeva koulutus on annettava ennen tämän tuotteen käyttöä todellisessa tilanteessa.

Säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. Sisällytä se tuotteen mukana, jos siirrät sen uusille käyttäjille. Ilmaisia lisäkopioita on saatavilla pyynnöstä asiakaspalvelusta.

Omistusoikeusilmoitus

Tässä oppaassa esitetyt tiedot ovat Ferno Australia Pty Ltd:n omaisuutta. Ferno Australia Pty Ltd pidättää itsellään kaikki immateriaalioikeudet, suunnittelu-oikeudet, valmistusoikeudet, jäljentämisen käyttö-oikeudet ja myyntikäyttö-oikeudet niihin ja kaikkiin siinä esitettyihin esineisiin paitsi siltä osin kuin nämä oikeudet on nimenomaisesti myönnetty muille tai jos niitä ei voida soveltaa myyjän omistamiin osiin.

Rajoitettu takuu

Feron myymät tuotteet kuuluvat rajoitetun takuun piiriin. Rajoitetun takuun täydelliset ehdot ja vastuun rajoitukset ja vastuuvapauslausekkeet ovat myös saatavilla pyynnöstä ottamalla yhteyttä Ferno Australiaan sähköpostitse: info.au@ferno.com.

Ilmoitus haittavaikutuksista

Jos tämän laitteen käyttöön liittyy haittatapahtuma tai vakava vaaratilanne, loppukäyttäjän/operaattorin on ilmoitettava tapahtumasta osoitteeseen Ferno Australia, 11 Johnstone Road, Brendale Queensland 4500 Australia, +61 7 3881 4999 tai sähköpostitse osoitteeseen info.au@ferno.com. Jos tapaus sattui Euroopan unionissa, ilmoita siitä Feron valtuutetulle EU-edustajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon loppukäyttäjä on sijoittautunut.



KÄYTTÖOHJEET

Pyydä lisää ilmaisia käyttöoppaita ottamalla yhteyttä Ferno Customer Relations -osastoon, Ferno-jälleenmyyjäsi tai käymällä osoitteessa www.ferno.com.au.



Ferno Australia Pty Ltd 11
Johnstone Road, Brendale
Queensland 4500, Australia



Ferno Srl
kautta B. Zallone, n. 26,
40066 Pieve di Cento, Bologna, Italia
+35 051 6860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleckheaton West
Yorkshire BD19 4T, Iso-Britannia
+ 44 1274 851 999



1 - TURVALLISUUSTIEDOT

1.1 Varoitus

Varoitusilmoitukset osoittavat mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan, jos sitä ei vältetä.



VAROITUS

Jalkahihnat eivät ole suunniteltu tai mitoitettu kestämaan potilaan koko painoa. Älä käytä kävelyhihnaa nostovaljaina.

1.2 Huomautus

Ilmoitukset korostavat tärkeitä, mutta eivät vaaroihin liittyviä tietoja. Huomautusten noudattamatta jättäminen voi johtaa tuotteen tai omaisuuden vahingoittumiseen.

ILMOITUS

1.3 Vihje

Vinkit antavat suosituksia tuotteen käytön helpottamiseksi.




1.5 Symbolisanasto

Alla määriteltyjä symboleja käytetään Walk Beltissä ja/tai tässä käyttöoppaassa.

Symboli	Määritelmä
	Tuotekoodi
	Sarjanumero
	Eränumero
	Valmistuspäivämäärä
	Eläkkeelle jäämispäivä / voimassolon päättymispäivä
	Valmistaja
	Euroopan unionin standardien mukainen
	Yhdistyneen kuningaskunnan standardien mukainen
	Euroopan yhteisön valtuutettu edustaja
	Valtuutettu edustaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
	Lääketieteellinen laite
	Lue ja säilytä käyttöohjeet

1.6 Tuotteen tunnistetarra

Tuotteen tunnistetarra sisältää tärkeitä tietoja tuotteesta, mukaan lukien sarjanumeron, valmistuspäivän ja käytöstä poistamisen.

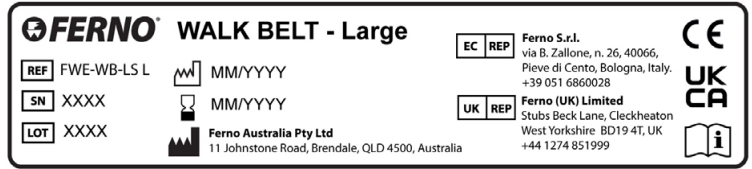


2 - TIETOJA KÄVELYVYHNASTA

Ferno Walk Belt on suunniteltu ensihoitajalle ja ensiaputerveydenhuollon ammattilaisille auttamaan potilaita kävellessä.

Ferno Walk Belt kiinnittyy potilaan vyötärön ympärille ja siinä on kahdeksan kahvaa – neljä vaakasuoraa ja neljä pystysuoraa kahvaa – sekä kaksi jalkahihnaa, jotka on suunniteltu vahvistamaan kävelyhihnaa, kun niitä käytetään vakauttamaan epävakaita potilaita. Kävelyvyö vähentää merkittävästi käyttäjän auttamista kävellessä. Ferno Walk Belt voidaan pestä koneessa ja käyttää uudelleen toistuvasti.

TUOTTEEN NIMI:	Vakausapu. Ei putoamisen pysäyttämiseen korkealta.
YLEINEN KÄYTTÖ:	Parantaa hoitajien kykyä tarjota vakautta potilaille kävellessään
Vyötärönympärysmitta:	FWE-WB-LS (Standard)150 cm /FWE-WB-LS L (stor)180cm

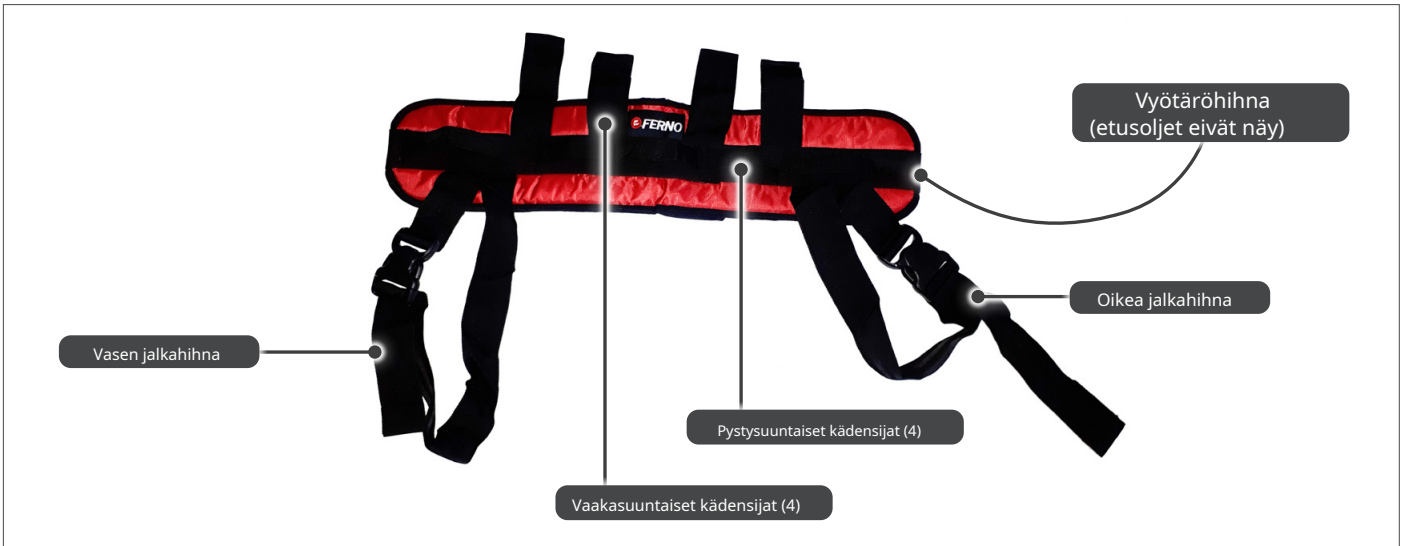

3 - KÄVELYVYÖN ASENNUS JA KÄYTTÖ


Kävelyvyön asentaminen ja käyttö

1. Vapauta vyötärövyön solki ja kiedo Walk Belt potilaan vyötärön ympärille. Kiinnitä solki yhteen ja säädä vyön hihnaa edelleen niin, että kävelyvyö sopii tiiviisti potilaan kehoa vasten.

Säädä kävelyhihna etukäteen

Säästä aikaa ja vähentää potilaalle aiheutuvaa haittaa arvioimalla potilaan vyötärön koko ja säätämällä Walk Belt etukäteen ennen vyön asettamista potilaalle.

Tip

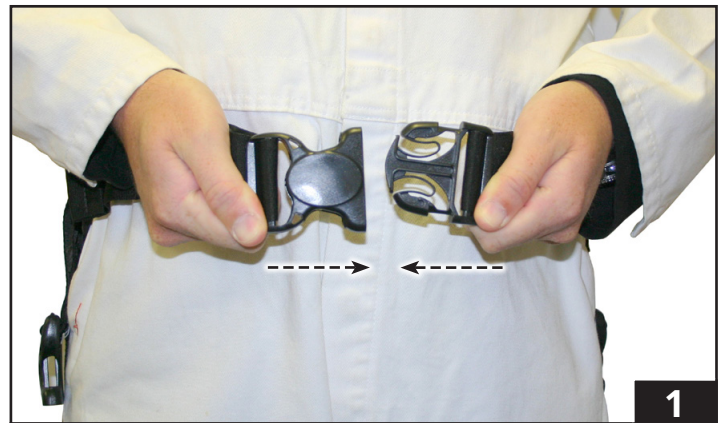

2. Vapauta vasemman jalan hihnan solki. Kiedo pitkä vasen jalkahihna vasemman jalan takaosan ympäri jalan etuosaan nivusalueen kautta ja kiinnitä solki uudelleen (kuvat 2 ja 3). Säädä hihnat tarvittaessa tiukan ja mukavan istuvuuden takaamiseksi.
3. Toista vaihe 2 oikean jalkahihnan kanssa.
4. Kun kävelyvyö on kiinnitetty tiukasti potilaaseen, käyttäjä voi käyttää mitä tahansa pysty- tai vaakasuoraa kädensijaa (kuvat 4 ja 5) auttaakseen potilasta kävellessä.


ILMOITUS

Jalkahihnat on kiinnitettävä potilaaseen, jos potilasta halutaan siirtää joko seisoma-asennosta istuma-asennosta tai päinvastoin. Jalkahihnat on suunniteltu tukemaan potilasta näiden liikkeiden aikana ja pitämään kävelyvyyön alkuperäisessä kiinnitysasennossaan.



VAROITUS

Jalkahihnat eivät ole suunniteltu tai mitoitettu kestäämään potilaan koko painoa. Älä käytä kävelyhihnaa nostovaljaina.

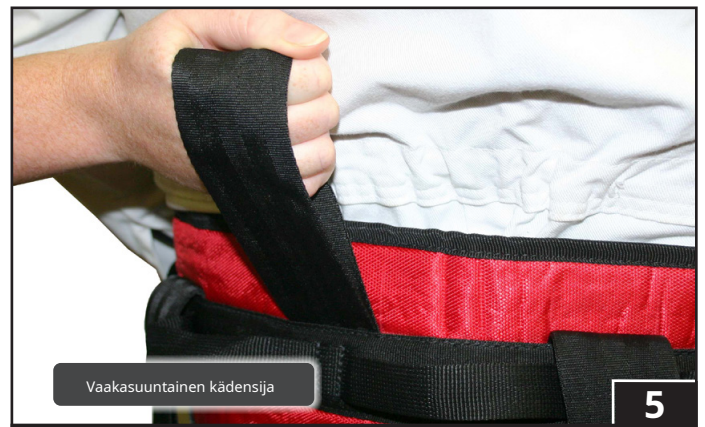

Tarkastukset

Tarkasta Walk Belt varmistaaksesi, että se on käyttökelpoinen ennen sen säilyttämistä. Tarkastuksen tarkistuslista toimitetaan oppaana. Anna mahdolliset huononemisen merkit pätevän tai valtuutetun henkilön tehtäväksi tuotteen turvallisuutta ja huollettavuutta koskevaa päätöstä varten.

KÄVELYVYÖN TARKASTUSLUETTELO

WEBBING	Naarmuuntumista, viiltoa tai repeytymistä
	Lämmön, syövyttävien aineiden tai liuottimien aiheuttamat vauriot
	Mädäntymisen, homeen tai ultraviolettisäteilyn aiheuttama huononeminen
OMPELU	Katkenneet, leikatut tai kuluneet ompeleet
SOJET & SÄÄTIMET	Soljet on ommeltu tukevasti Walk Belt -hihnaan
	Quick Connect Soljet kiinnittyvät kunnolla, kun ne on kytketty
	Quick Connect -soljen vapautusmekanismi toimii sujuvasti aktivoituna

Puhdistus

Tämä tuote on puhdistettava säännöllisesti sen turvallisuuden ja huollettavuuden säilyttämiseksi.

1. Harjaa irtonainen lika pois.
2. Suihkuta puhdistusliuokseen. Älä käytä liuoksia, jotka sisältävät valkaisuainetta, fenoleja, jodideja tai öljyä.
3. Käytä puhdistukseen pehmeää harjasta.
4. Anna puhdistusliuoksen imeytyä nauhaan.
5. Käsien tai konepesu 40°C asti.
6. Kuivaa ilmassa hyvin ilmastoidussa tilassa, suojassa suoralta auringonvalolta.

Varastointi

Säilytä tuotetta suojassa suoralta auringonvalolta, liiallisesta pölystä ja kosteudesta sekä syövyttäviltä ympäristöiltä.