

Ohjekirja

Säästäjä turvallinen Evakuointituoli



Vastuuvapauslauseke

Tämä käsikirja sisältää yleiset ohjeet Ferno Saver Safe -poistustuolin käyttöön, käyttöön ja hoitoon. Ohjeet eivät ole kattavia. Tämän tuolin turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän harkinnan varassa. Turvallisuustiedot sisältyvät palveluun ja suositukseen käyttäjälle. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien turvatoimenpiteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaisia ja niiden tulee olla niiden mukaisia. On suositeltavaa järjestää tuolin asianmukaista käyttöä koskeva koulutus ennen tuolin käyttöä todellisessa tilanteessa. Säilytä tämä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Sisällytä se tuoliin, jos se siirretään uusille käyttäjille. Lisäkopioita on saatavilla pyynnöstä Ferno (UK) Ltd: ltä.

Suurin kuormitettavuus - 180 kg

1. Tuolin aiottu käyttö

Ferno Saver Safe Chair on potilaan käsittelylaite, joka on suunniteltu kuljettamaan potilasta / henkilöä istuimessa portaita pitkin ja myös tasaisella alustalla. Sitä voidaan käyttää myös kantotuolina matkustajien siirtämiseen yläkertaan.

Puheenjohtaja on tarkoitettu täysin koulutettujen ja pätevien hoitajien, ensihoitajien tai muun vastaavan henkilöstön käyttöön apuna ihmisten turvallisen evakuoinnin varmistamiseksi rakennuksesta hätätilanteessa.

2. Turvallisuustiedot



VAROITUKSET JA TURVALLISUUSTIEDOT



- Älä koskaan ylitä enimmäiskuormitettavuutta 180 kg
- Ainoastaan tuolin käyttöön koulutettu pätevä henkilöstö saa käyttää sitä
- Turvallisuussyistä on tärkeää, että matkustajat kiinnitetään aina mukana toimitetuilla turvajärjestelmillä
- Älä koskaan jätä miehitettyä tuolia ilman valvontaa
- Vältä tuolin nopeaa uudelleenasettelua - se voi vahingoittaa matkustajaa ja / tai käyttäjää
- Tue tuolia aina kahvoja säätäessä
- Kohdunkaulan, selkärangan tai joidenkin murtumien yhteydessä tuolin käyttöä potilaan siirtämiseen ei suositella
- Virheellinen huolto voi aiheuttaa loukkaantumisen ja arvaamattoman toiminnan
- Määritä säännölliset tarkastusmenettelyt ja vastuut puheenjohtajan asianmukaisen kunnossapidon varmistamiseksi
- Ylläpidä tuolia vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla
- Väärät osat ja huolto voivat aiheuttaa vammoja. Käytä vain Fernon hyväksymiä osia ja huoltoa
- Valkaisuaine, fenolit ja jodi voivat vahingoittaa; älä levitä näitä kemikaaleja sisältäviä tuotteita tuolille
- Väärät voiteluaineet voivat vahingoittaa; voitele tuolin määrätty osat kevyellä öljyllä
- Veren kautta tarttuvaa tautia koskeva huomautus - Noudata tuolia käyttäessäsi tuolia käytettäessä veren kautta tarttuvien tautien (kuten HIV-1 ja hepatiitti) altistumisen riskiä tuolia käytettäessä.

2a. Vastuu

- Pätevän henkilön tulisi suorittaa riskinarviointi koko henkilöstön ja vierailijoiden, myös liikuntarajoitteisten, hätäevakuoinnista
- Harkitse nykyisten työntekijöiden ja kävijöiden liikkuvuutta sekä mahdollisia rajoituksia kenenkään pääsyle sivustoon tulevaisuudessa. Tässä on otettava huomioon heidän fyysiset, henkiset (mukaan lukien oppiminen) ja ikään liittyvät terveys- ja liikkumisrajoitukset
- Harkitse työntekijöiden ja muiden todennäköisesti paikalla olevien lukumäärää ja sijaintia eri aikoina normaalin työajan ulkopuolella ja sen ulkopuolella
- Harkitse evakuointireittien määrää, sijaintia ja sopivuutta. Muista sisällyttää käytävät, portaat, uloskäynnit ja nimettyjen kokoonpanopisteiden sopivuus
- Laadi ja toteuta asianmukainen hätäevakuointisuunnitelma, joka saa kaikki tietämään menettelystä ja järjestelmästä
- Harkitse käytössä olevien hälytysjärjestelmien tyyppiä. Otetaanko he huomioon mahdollisten läsnä olevien vammaisuus?
- Valitse ja kouluta sopivia henkilöitä suorittamaan määrätty tehtävät evakuoinnin aikana; ts. ensiapu, palovartija, omistautuneet saattajat ja tuolinoperaattorit. Huom: Palomiehiä ei tule valita suorittamaan evakuointituolien operaattoreiden / omistettujen saattajien roolia, koska heillä on omat tehtävänsä hätätilanteessa
- Suorita säännölliset paloharjoitukset varmistaaksesi tilojen evakuoinnin tuntemuksen ja tehokkuuden. Harkitse aikaa, joka kului tilojen evakuointiin. Testaa palohälytykset viikoittain
- Tarkasta riskinarviointi säännöllisin väliajoin (kahdesta neljään vuoteen riskin suuruudesta riippuen) ja myös, kun uusi liikuntarajoitteinen työntekijä otetaan palvelukseen, kun on syytä epäillä olemassa olevia toimenpiteitä tai kun on tapahtunut merkittävä muutos

2b. Ihmiset, jotka voivat olla vaarassa hätätilanteessa

- Vanhemmat Ihmiset, joilla on liikkumis-, näkö-, kuulo- tai muita häiriöitä
- Jokainen loukkaantuu tai kärsii sairaudesta ennen evakuointia tai sen aikana
- Kuka tahansa, jolla on tilapäinen ongelma, mukaan lukien vierailijat ja henkilökunta, sekaannusta, ahdistusta tai ahdistusta tilanteen seurauksena
- Raskaana olevat naiset
- Vanhempi, jolla on yksi tai useampi pieni lapsi
- Henkilö, jolla on fyysinen vamma
- Henkilö, jolla on oppimisvaikeuksia
- Henkilö, jolla on näkymätön tila, esim. Astma, sydänvaivat, epävakaat epilepsia- tai diabeettiset tilat - heidän tilansa voi vaikuttaa heidän kykyynsä päästä ulos ilman apua hätätilanteessa

2c. Operaattorin taidot:

Koulutettujen käyttäjien on kyettävä:

- Reagoi rauhallisesti hätätilanteessa
- Tee tuoli käyttövalmis hätätilanteessa
- Rauhoita ja auta liikuntarajoitteisia henkilöitä hoidossa Evakuoi alue
- nopeasti ja turvallisesti
- Pysy heidän vastuullaan, kunnes hän on hätäpalvelujen tai muiden vastuuhenkilöiden hoidossa

3. Kuljettajan koulutus

Tärkeitä turvallisuustietoja

- EMS-kouluttajan (tai vastaavan) hyväksymää koulutussuunnitelmaa suositellaan
- On erittäin suositeltavaa, että seuraavat menettelyt suoritetaan tuolilla, joka on täynnä nukkeja, kuten pussitettua rakennusliikkeen hiekkaa tai soraa
- Tuoli on tarkistettava ohjeiden mukaisesti (katso osa 3a, "Tuolin valmistelu käyttöä varten")
- On suositeltavaa, että tuolia käytetään aina, kun mahdollista, vähintään kahden käyttäjän kanssa, ja käyttää lisäapua tarpeen mukaan tuolin hallintaan
- Varmista, että reitti portaita pitkin on vapaa esteistä, jotka voivat vaikuttaa kuljettajien turvallisuuteen tai raiteiden toimintaan
- Varmista, että portaat ovat sopivassa kunnossa henkilöiden kuljettamiseen tuolilla tuolin käyttäjien kanssa
- Kaikkien käyttäjien on luettava ja ymmärrettävä tämän oppaan ohjeet. Harjoittelijat
- on testattava varmistaakseen, että he ymmärtävät tuolin toiminnan
- Kaikkien koulutettujen kuljettajien koulutusrekisterit tulisi pitää, kaikille tuolin käyttäjille suositellaan vuosittaista täydennyskoulutusta
- Älä koskaan voitele raidevöitä - voideltuja hihnoja voi toimia arvaamattomasti, mikä voi johtaa potilaan ja / tai käyttäjän loukkaantumiseen
- Tarkista aina hihnan kireys varmistaaksesi, että ne eivät ole löysällä. Hihnojen tarkastusohjeet ovat tässä käyttöohjeessa
- Kosteus, vesi, lumi, jää tai roskat radalla tai hihnojen välillä voivat aiheuttaa epätasaisen suorituskyvyn, mikä johtaa äkillisiin muutoksiin painon kuljettajien on tuettava; varmista, että ratat ja ratavyöt ovat puhtaat ja kuivat ennen tuolin käyttöä portaissa
- Poista aina portaat roskista jne., jotka voivat häiritä tuolin toimintaa tai estää käyttäjiä
- Siirrettäessä potilaat ilmoittavat heille aina, mitä aiot tehdä. Käytä aina mukana
- toimitettuja turvajärjestelmiä ja tarkista, että potilas ja turvajärjestelmät ovat kunnossa

3a. Tuolin valmistelu käyttöä varten

1. Poista pölysuojus tuolista ja irrota tuoli sitten seinäkiinnikkeestä



2. Irrota turvavyö samalla kun pidät tuolia taitetussa asennossa
3. Pitämällä tuolia lattialla yhdellä kädellä ja pitämällä sitä taitettuna, nosta toisella kädellä takakahva korkeimpaan asentoonsa varmistaen, että se lukittuu paikalleen siten, että lukitustapit ovat kahvan letkun kummallakin puolella



Huom. Kahva lasketaan alas painamalla kahta lukitustappia, jotka sijaitsevat tuolin kahvan putken sisäpuolella, tuolin molemmilla puolilla



4. Pidä tuolia lattialla, vedä takapyörät ulos, vetämällä tankoa itseäsi kohti ja sitten ylöspäin, kunnes takapyörät ovat täysin ulospäin ja lukittuvat paikalleen.



5. Kallista tuolia sivuttain niin, että se istuu kaikilla neljällä pyörällä



6. Vedä istuinta eteenpäin ja alas istuma-asentoon



7. Puheenjohtaja on nyt käyttövalmis



3b. Potilaan kiinnittäminen tuoliin

1. Kallista tuolia hieman eteenpäin niin, että istuin on vaakasuora, kun taas matkustajaa autetaan tuolille
2. Kun henkilö on tuolilla, tuo tuoli takaisin niin, että se lepää kaikilla neljällä pyörällä



3. Kun matkustaja on istutettu mukavasti tuoliin, kiinnitä matkustaja tuoliin mukana toimitetulla rintakiinnityshihnalla
4. Kiinnitä potilaan pää päänauhalla (tarvittaessa)



5. Potilas on nyt valmis kuljettamaan portaita alas



3c. Tuolin ja matkustajan kuljettaminen alas portaita pitkin

Ferno suosittelee, että vähintään kahta käyttäjää käytetään aina kun mahdollista evakuoidessaan portaita alas

1. Kun yksi kuljettaja sijaitsee portaikon yläosassa ja toinen kuljettaja tuolin takapäessä, työnnä tuolia kohti portaita ja pysähdy ensimmäisen askeleen edessä kulmassa poispäin portaikosta



2. Kallista tuolia hitaasti eteenpäin, kunnes kumipäälysteinen etutanko on lattialla, etupyörät ovat hieman irti maasta ja potilaan paino siirtyy etupalkkiin ja ei lepää päällä the kuljettajan takapyörät voidaan sitten taittaa pois alla kuvatulla tavalla



3. Pidä tuolista kiinni samassa kulmassa koko ajan, paina jalkaa työntämällä takarengas akseli baari (merkitty punaisella tarralla) ja työnnä sitten jalkasi eteenpäin tuolin etuosaa kohti, kunnes takapyörät taittuvat kokonaan irti ja napsahtavat pidikkeeseen



4. Kun toinen kuljettaja on edelleen portaikon yläosassa, ohjaa tuolia ylimpään vaiheeseen varmistaen, että molemmat etupyörät ovat neliön kanssa askelman kanssa




5. Toinen kuljettaja voi antaa tukea tuolin edestä ohjaamaan paikalla ja varmistaakseen, että tuoli ei mene ensimmäisen vaiheen yli, kun tuoli asetetaan portaikkoon



6. Kun tuoli on asetettu oikein ylimmän askelman eteen ja molemmat kuljettajat ja matkustajat ovat valmiita laskeutumaan portaita pitkin, ohjaa tuolin etupyöriä ensimmäisen askeleen yli, kunnes raita lepää ylimmän askelman nenällä (reunalla)




7. Jalkaosan kuljettaja voi auttaa päätä kuljettajaa ohjaamaan tuolipyörää ensimmäisen askeleen yli joko pitämällä istuimen kehystä tai pitämällä etupalkkia tuolin pohjassa

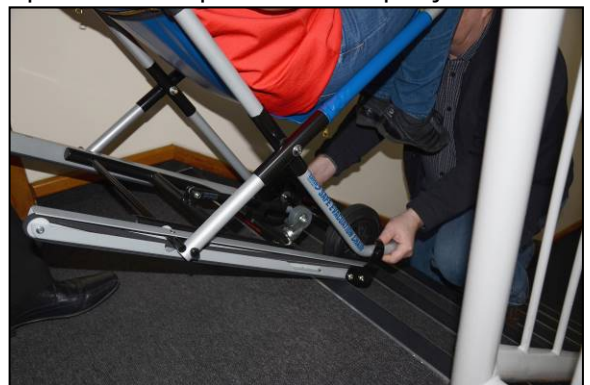

8. Jatka tuolin ohjaamista, kunnes raita lepää 2 portaiden reunalla ja sitten 3 portaiden reunalla

Turvallisuussyistä on suositeltavaa, että päätyoperaattori pitää kahvasta kiinni tarttumalla kahvan alapuolelta pitääkseen pidon aina

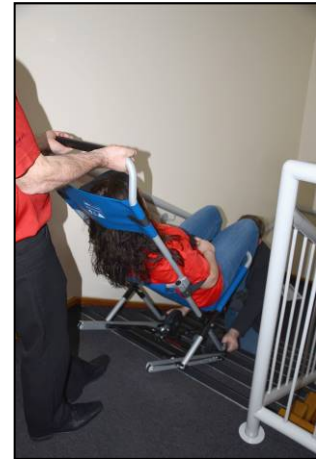

9. Pidä oikea raidekulma siten, että raidevyö lepää aina 3 portaiden reunalla, kun tuolia siirretään alas portaita pitkin

10. Jos sitä tarvitaan raidekulman pitämiseen paremmin, päätyoperaattori voi muuttaa kahvan pitoa niin, että toinen käsi tarttuu kahvan yläpuolelta ja toinen alhaalta. Tämä varmistaa turvallisuuden pitämällä tuolia kiinni ja antaa samalla kuljettajalle mahdollisuuden työntää tuoli alas portaisiin pitääkseen oikean tuolikulman



11. Kun portaiden juurella pyörät ovat koskettaneet maata, päätyoperaattori voi ohjata tuolia viimeisestä vaiheesta




3d. Ohjaus laskeutumisen ympärillä

1. Kun lasku on saavutettu, käännä tuolia kallistamalla sitä hieman eteenpäin ja nostamalla paino etupyörille ja ohjaa sitten tuolia taivutuksen ympäri, kunnes se on tasainen ja neliönmuotoinen seuraavan askeleen yläosalla.
2. Samaa menettelyä noudattaen kuin aikaisemmin, ohjaamalla tuolia varovasti ensimmäisen askeleen yli ja sitten jäljellä olevat vaiheet pitämällä raidakulmaa aina



3e. Saavutat portaikon pohjan

1. Kun portaiden pohja on saavutettu, ohjaa tuolia riittävän kauas portaasta, jotta takapyörät voidaan ottaa uudelleen käyttöön
2. Kallista tuolia hieman eteenpäin ja pidä tukevasti kiinni tuolista, vedä takapyörät jalkaasi itseäsi kohti, kunnes ne avautuvat kokonaan
3. Varmista, että pyörät ovat täysin paikallaan ja ojennettuina, vie tuoli alas niin, että se lepää kaikkien neljän pyörän päällä
4. Tuoli voidaan nyt ajaa pois portaikosta ja turvalliselle alueelle

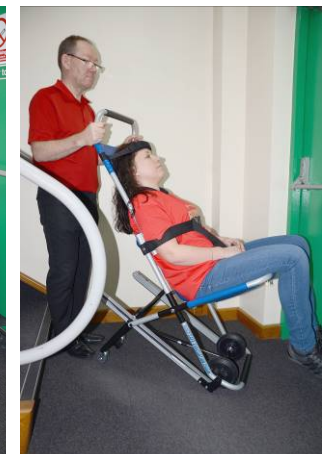

4. Lisäohjeen käyttäminen

Ferno suosittelee, että vähintään kaksi operaattoria on läsnä, kun tuolia käytetään potilaiden evakuointiin.

Olosuhteet, kuten pääsy, sääolosuhteet tai potilaan paino, saattavat tarvita lisäapua portaita käytettäessä; tämä on arvioitava tuolloin.

5. Huolto

5a. Saver Safe -tuolin tarkistaminen

Loppukäyttäjän on suoritettava säännöllisesti seuraavat epäviralliset visuaaliset tarkastukset ja tuolin fyysinen tarkastus myös käytön jälkeen.


- Tuolin yleinen puhtaus
- Tarkista, ettei ole taipuneita tai vaurioituneita osia, puuttuvia kiinnikkeitä
- jne. Tarkista, että pyörät pyörivät vapaasti ilman liikaa tai vaurioita
- Tarkista, että tuoli avautuu ja lukittuu tukevasti istuma-asennossa normaalia käyttöä varten
- Tarkista, että raidevyö ei ole löysällä ja että telajärjestelmä toimii oikein
- Tutki, onko hihnassa vaurioita
- Tarkista, ettei istuinsuojuksessa ole halkeamia, halkeamia, irtonaisia kankaita tai ompeleita
- jne. Tarkista, että istuinsuojus on kiinnitetty oikein kehykseen

Jos sinulla on epäilyksiä, ota yhteyttä Ferno-huoltoteknikkoon

ÄLÄ KOSKAAN VOITELE TAI SALLI VOITELUAINEIDEN OTTAA YHTEYTTÄ
Raide- ja vyöjärjestelmä

5b. Hihnan kiristys

Jotta tuoli toimii suunnitellusti ja oikein hallinnassa, raidevyön on oltava oikean kireän. Suositeltavat menettelyt hihnan kireyden tarkistamiseksi ovat seuraavat:

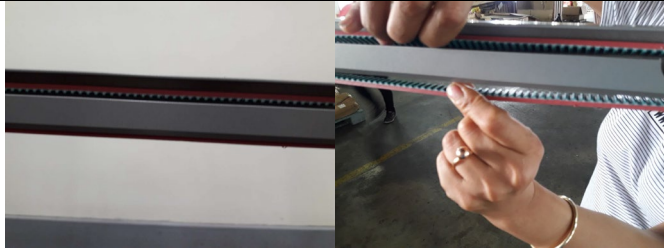


Oikea kireys



Vyö liian löysä


Tarkista molempien hihnojen kireys. Vedä hihna irti kehyksestä ja sinun pitäisi pystyä työntämään enintään yksi sormi väliin vyö ja metallirunko

Jos rako on huomattavasti suurempi, ota yhteyttä Fernoon hihnana todennäköisesti korvaa

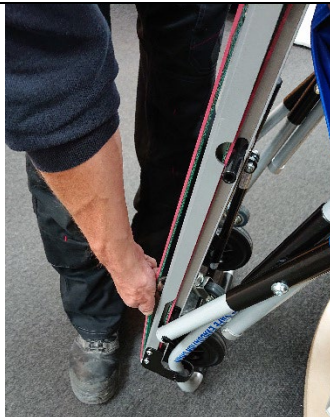


Molempien hihnojen pyörimistä on arvioitava sen varmistamiseksi, että ne liikkuvat vapaasti ja ettei yksi vyö ole tiukempi kuin toinen. Vedä hihnaa manuaalisesti kuvan mukaisesti, raidan molemmissa päissä olevan hihnapyörän tulisi pyöriä ja sinun pitäisi pystyä tuntemaan vastus ilman, että vyö on niin tiukka, että se vain liikkuu äärimmäisellä voimalla

Jos pyörä ei liiku vapaasti, pyörää runkoon kiinnittävä pultti saattaa joutua löysäämään hieman, jotta se voi liikkua vapaasti

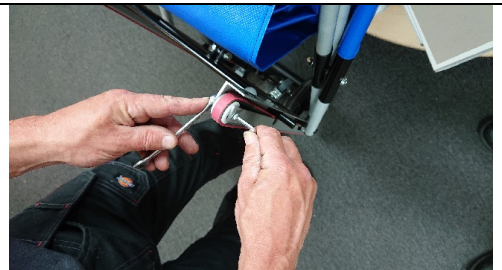

On suositeltavaa, että molempien hihnojen on oltava samanlaiset, jos yksi hihna vaatii lisäjännitystä, kiristä vetävä pyörä 4 mm: n kuusiokoloavaimella ja 8 mm: n kiintoavaimella

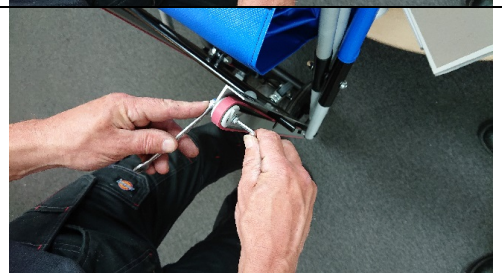

5b. Hihnan kiristys (jatkuu...)

	Se on sug puoli tu jännitys kasvaa req
Joka puoli kierrosta arvioi hihnojen kireys lisääntynyt tai vähentynyt vastus	

5c. Ehdotettu huoltoaikataulu

Saver Safe Chair vaatii säännöllisiä epävirallisia visuaalisia tarkastuksia. Määritä ja noudata omaa huoltoaikataulustasi, mutta käytä vähintään seuraavaa.

Tiheämpää huoltoa tarvitaan useammin. Jos vaurioita havaitaan, ota tuoli pois käytöstä, kunnes se voidaan korjata tai vaihtaa.

Toiminta	Tarvittaessa	Joka kuukausi
Desinfiointi	•	
Siivous	•	
Tarkastus	•	•
Voitelu (saranat, pyörät jne.) ÄLÄ VOITELE RATAA TAI Hihnaa	•	

Noudata mitä tahansa tuotetta huollossa noudattaen valmistajan ohjeita ja lue valmistajan käyttöturvallisuustiedote.

VAROITUS

**Väärä huolto voi aiheuttaa vammoja. Ylläpitää tuolia vain
tässä oppaassa kuvattu käyttötarkoitus.**

5d. Desinfiointi

Desinfioi kaikki tuolin pinnat, mukaan lukien potilaan turvajärjestelmät. Noudata desinfiointiaineiden valmistajien käyttöohjeita. Suihkuta tai pyyhi desinfiointiaine potilaan turvajärjestelmiin. Älä upota desinfiointiaineeseen.

5e. Siivous

Puhdista tuoli ja sen osat puhtaalla liinalla tai pehmeällä harjalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee lämpimällä vedellä ja kuivaa ilmassa. Älä puhdista valkaisuainetta tai fenolia sisältävillä tuotteilla. Tarvittaessa voidaan käyttää jäykkä harjattua harjaa.

**Säännöllinen puhdistus auttaa vähentämään tautien leviämiskä ja mahdollistaa
laitteiden toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.**

6. Tekniset tiedot

Saver Safe -tuoli		
	Sijainti	Ulottuvuus
KIINTEÄ	Istuimen syvyys	43,2 cm (17 tuumaa)
	Istuimen leveys	51,1 cm (20,1 tuumaa)
	Yläkahvan korkeus	
	- Max	133,4 cm pidennetty
	- Min	92,71 cm vedetty sisään
	Kokonaisleveys	52,7 cm
	Kokonaissyvyys	91,4 cm
	Paino	10,5 kg
Taitettu	Enimmäiskuormituskyky	180 kg
	Korkeus	103 cm
	Leveys	52,7 cm
	Syvyys	25,4 cm

- Kaikki mitat ovat likimääräisiä
- Kantavuus on kokonaispaino ihmisen anatomian perussuhteiden mukaisesti.
- Hoitajien on otettava huomioon potilaan paino ja lisävarusteet määritettäessä tuolin kokonaiskuormitusta.

7. Takuu ja huolto

Vakioleikkeitä sovelletaan kaikkeen myyntiin. Kopio on saatavilla pyynnöstä. Ne sisältävät täydelliset tiedot takuuehdoista eivätkä rajoita asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

Jos tarvitset huoltoa, huoltoa ja muita tätä tai muita Ferno-tuotteita koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä:

Fernon talo
Stubs Beck Lane
Cleckheaton
Länsi-Yorkshire
Englanti
BD19 4TZ
Puhelin: +44 (0) 1274 851999
Faksi: + 44 (0) 1274 851111

Valmistanut:
Ferno Slovakia
Bosaka 893
91307
Slovakia

Puhelin: (421) (32) 778-1072

Tai paikallisen jälleenmyyjän, jos asut Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella.

[illegible]

Rekisteröity toimisto:

Ferno (UK) Limited

Ferno-talo, Stubs Beck Lane, Cleckheaton, Länsi-Yorkshire, Englanti. BD19 4TZ

Puh: + 44 (0) 1274 851999 Faksi: + 44 (0) 1274 851111

Sähköposti: services@ferno.com

Koska toimintaperiaattemme kuuluu jatkuvaan kehittämiseen, Ferno (UK) Ltd pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Varastokoodi: 2003-0115



Tämän tuotteen CE-merkintä osoittaa lääkinnällisiä laitteita
koskevan EY-direktiivin 93/42 / ETY vaatimusten mukaisuuden