

Malli S-265 Scoop

Malli S-265 kauhapaarit on potilaan hätäapuväline. Se on suunniteltu auttamaan potilaan siirtämisessä, kun tilaa on rajoitetusti tai kun potilasta on siirrettävä muuttamalla kehon asentoa vain vähän. Käytä paareja sen maan lakien ja käytäntöjen mukaisesti, jossa sitä käytetään. Kysy asianomaisilta viranomaisilta tietoja laeista ja pöytäkirjoista ja ratkaise kaikki kysymykset, ennen kuin käytät paareita potilaan kanssa.

Paarit on tarkoitettu ammattikäyttöön vähintään kahdelle koulutetulle käyttäjälle.

Paarinrunko on rakennettu kahteen puolikkaaseen, jotka irtoavat, liu'utetaan potilaan alle ja taas kiinnitetään potilaan nostamiseksi. Paareja voidaan käyttää myös V-muodossa, kun ne on irrotettu vain jalkapäästä.


Muita ominaisuuksia ovat teleskooppinen jalkaosa lukituksella pituuden säätöasennot, kolme kädensijaa kummallakin puolella ja piilotetut saranat, joiden avulla paarit voivat taittua säilytystä varten.

S-265-malli on varustettu kolmella potilaan turvajärjestelmällä.



Tuotetiedot

Pituus avattuna:	1660 mm
Pituus max:	2013 mm
Pituus taitettuna:	1200 mm
Leveys:	422 mm
Korkeus avattuna:	670 mm
Korkeus taitettuna:	90 mm
Paino:	9,75 kg
Kantavuus:	159 kg

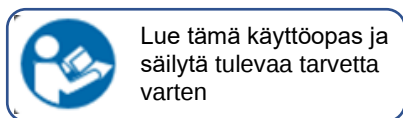

Lokakuu 2021, ver. 09

Pub. Nro 50-8112-001_09





Valmistaja:
Ferno Slovakia s.r.o.
913 07 Bosaca 893 Slovakia
Puh: +421 (0) 32 7708010, sales@ferno.sk

1. Pituuden säätäminen

Säädä parien pituus potilaan pituuteen ennen kuin irrotat puolikkaat. Tämä varmistaa tasaisen säätämisen molemmille puoliskoille.

KAUHAPAARIN PITUUDEN SÄÄTÖ

1. Siirrä lukitustapin vipu kehyksen kummallakin puolella lukitsematon- asentoon (kuva 1)
Huomaa: Kun parit ovat asetettuna vaakasuoraan tasaiselle pinnalle, lukittu asento on "alas" ja lukitsematon "ylös" (Kuvio 1)
2. Vedä jalkaosaa ulospäin haluttuun pituuteen pysähtyen lähelle yhtä lukitusasentoista, jotka sijaitsevat jalkaosan kehyksen rei'issä.
3. Palauta molemmat lukitustappivivut lukitusasentoon (kuva 1)
4. Työnnä tai vedä jalkaosaa hieman, kunnes se lukittuu paikalleen
5. Varmista, että molemmat puolet ovat kunnolla lukittu

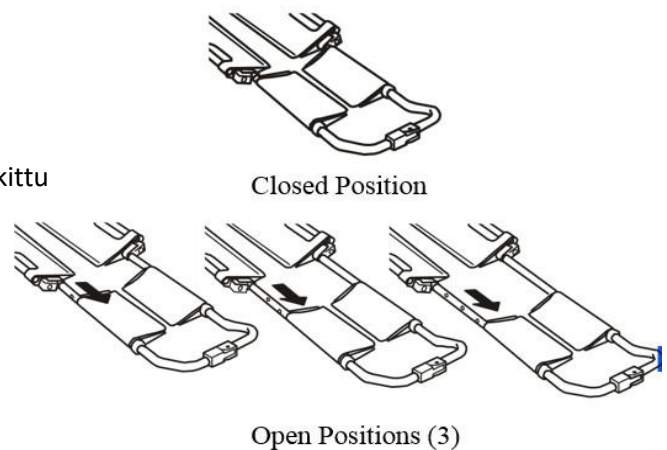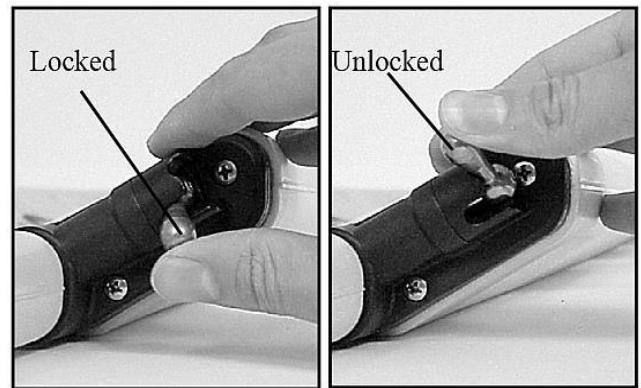


2. Kauhapaarien levittäminen

Erota parien puolikkaat painamalla peukaloilla Twin Safety Lock -vipuja molemmissa lukoissa ja vedä puoliskot irti toisistaan.



Kaksi turvalukitusvipua

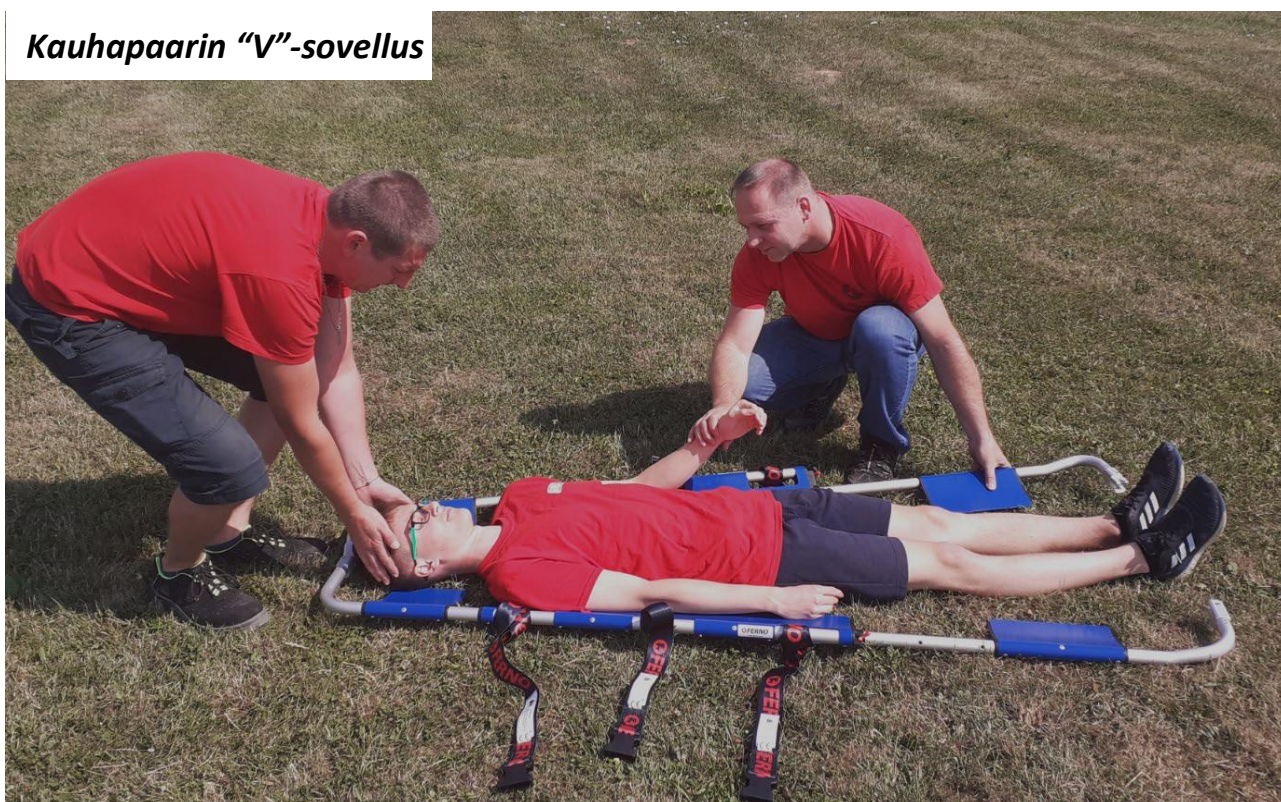

Kauhapaarin käyttö**Kauhapaarin "V"-sovellus**

Kauhapaarin kantaminen käyttö**3. KAUHAPAARIN “V”-SOVELTAMINEN**

Avaa paarit, jos ne ovat taitettu säilytystä varten, ja säädä pituus (katso paarinpituuden säätäminen)

1. Irrota potilasvyöt (jos ne on säilytetty paareilla)
2. Avaa vain jalkapuolen lukitus.
3. Vedä paarien jalkapuolen puolikkaat erilleen muodostaen ”V” -muoto.
4. Aseta paarit potilaan päähän ”V”: n pohjaan (kuva 6)
5. Käytä paikallisesti hyväksyttyjä EMS-menettelyjä paarien työntämiseksi sisäänpäin ja potilaan alle. Liikuta paarinpuoliskoja vuorotellen päästä päähän, kunnes jalanpuolen päässä olevat lukonpuolikkaat kohtaavat.


Vältä potilaan ihon, hiusten tai vaatteiden puristamista tai vetämistä työskennellessäsi paareilla potilaan alapuolella.

4. POTILASVÖIDEN kiinnittäminen


Malli S-265 Scoop Stretcher sisältää kolmet kaksiosaiset potilasvyöt.

Kaksiosaisen potilasvyön kiinnittäminen:

1. Irrota vyöt erottamalla ne kahteen osaan.
2. Vie yhden vyön silmukoitu pää ylöspäin kantimen rungon kahvanpitoaukon läpi.
3. Pidä silmukka auki ja pujota kiinnityssolki silmukan läpi
4. Vedä hihna silmukan läpi, kunnes silmukka on tiukasti vasten paareiden runkoa.
5. Varmista, että kaikki vyöt ovat kunnolla kiinni

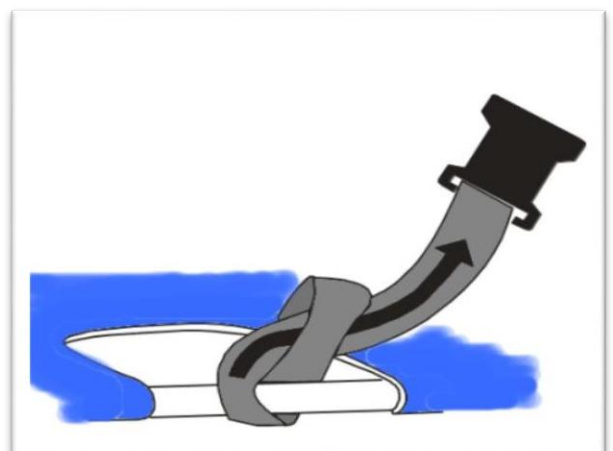

5. LISÄOHJEITA KÄYTTÖÖN

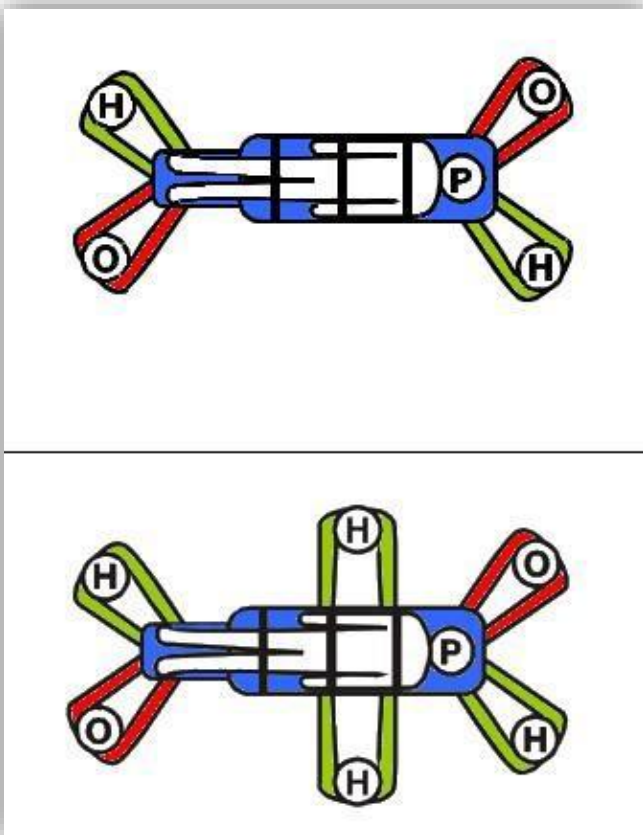


O-operaattorin H-auttaja P-potilas


6. KAUHAPPAARIN SÄILYTTÄMINEN

Avaa paarit, jos ne ovat taitettu säilytystä varten, ja säädä pituus (katso B paarien pituuden säätäminen)

1. Avaa lukitustappivivut paarien molemmin puolin.
2. Vedä jalkaosaa kokonaan vetämällä sitä ulos, kunnes saranat ovat täysin näkyvissä.
3. Nosta jalkaosa ja taita se vartalopaneelin päälle

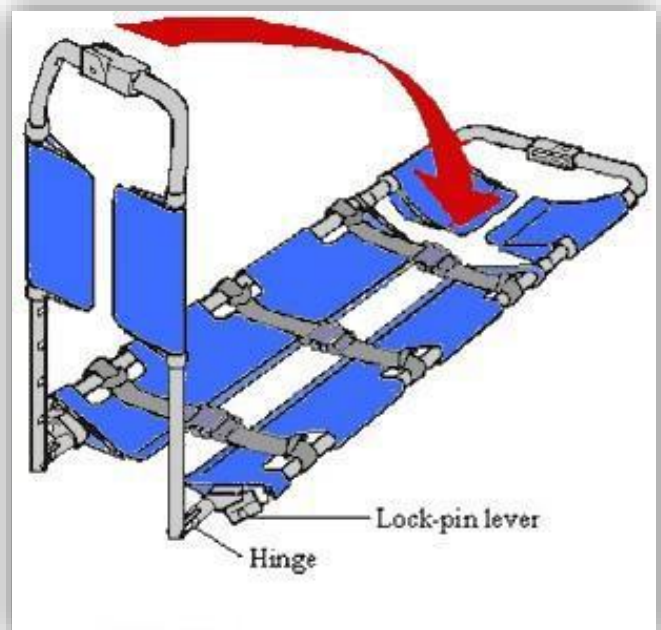


7. KAUHAPPAARIN OSAT

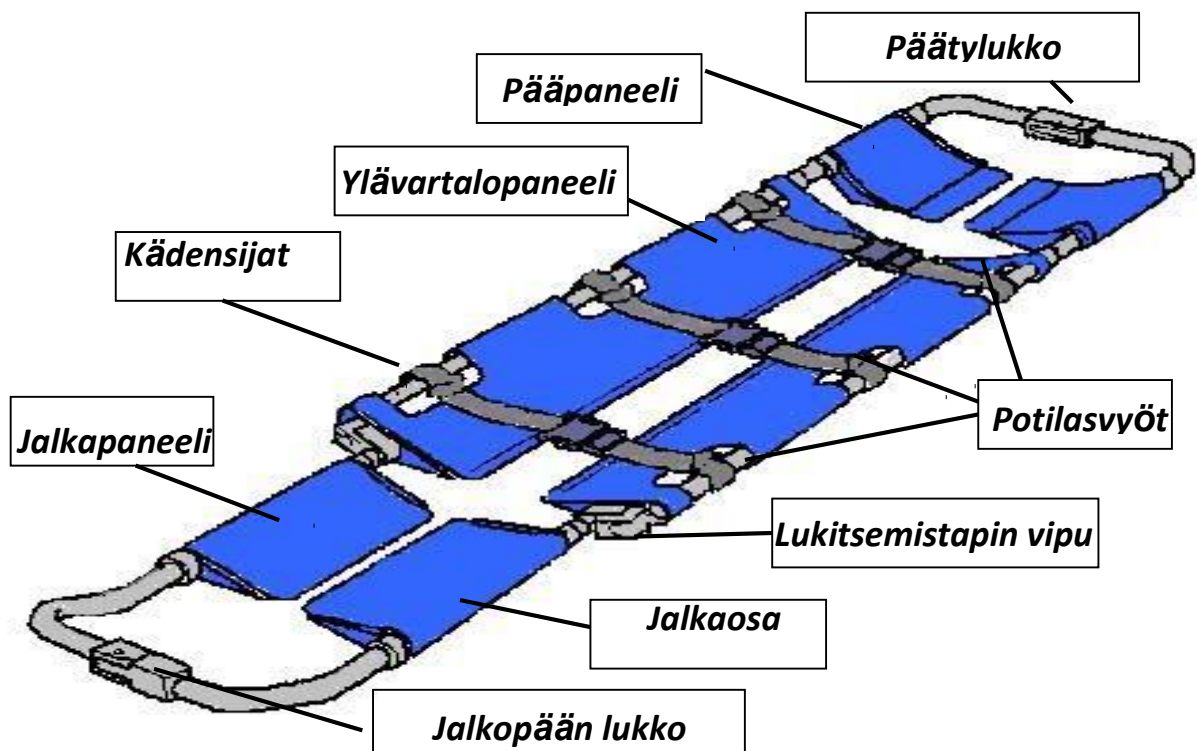

8. Kauhapaarin voitelu

- Valkoinen litiumrasva
- SAE 30-luokiteltu öljy
- Kuivapinnoitettu teflonivoiteluaine

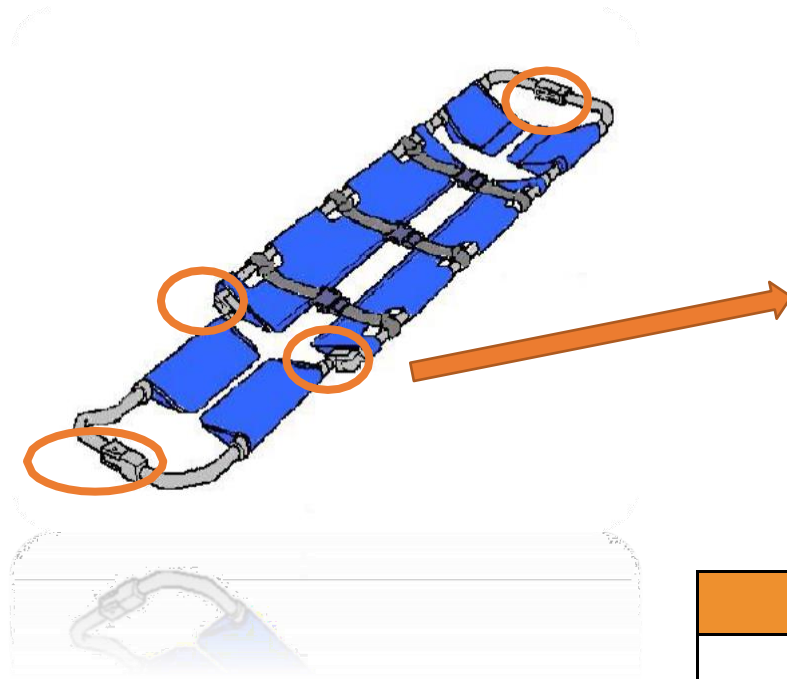


8. Takuu ja huolto

Vakiolausekkeita sovelletaan kaikkeen myyntiin. Kopio on saatavilla pyynnöstä. Ne sisältävät täydelliset tiedot takuuehdoista eivätkä rajoita asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia.

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, jos tarvitset huoltoa, huoltoa ja muita tätä tai muita tuotteita koskevia kysymyksiä.

Tämän tuotteen CE-merkintä osoittaa lääkinällisiä laitteita koskevan EY-direktiivin MDR 2017/745 ja EN 1865-1vaatimusten mukaisuuden.

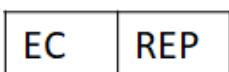

Ferno Washington Italia Srl
kautta B.Zallone, n26, 40066
Pieve di Cento, Bologna, Italia
+39,051,6860028



VAROITUS

Huoltoa ja korjausta varten ota yhteyttä myyntiedustajaasi

Paarien väärä käyttö voi aiheuttaa vammoja. Käytä paareja vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen.

Kouluttamaton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Salli vain koulutetun henkilöstön käyttää paareja.

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä paareja vain tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Valvoton potilas voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina.

Kiinnittämätön potilas voi pudota paareilta ja loukkaantua. Kiinnitä potilas paikoilleen kiinnittimillä.

Kouluttamattomat avustajat voivat aiheuttaa vammoja tai loukkaantua. Käytä ja pidä paareja tiukassa hallinnassa ja ohjaa avustajia.