

Suunniteltu tehtäväsi varten



Malli 11-2220 Mule II , jossa kahvat ,Malli
Malli 11-2220 Mule II , jossa kahvat
Malli 11-2220-G Mule II , jossa kahvat ,Malli
Malli 11-2220-G Mule II , jossa kahvat

Vastuuvapauslauseke

Tämä käyttöopas sisältää yleiset ohjeet tämän tuotteen käytöstä, käytöstä ja hoidosta. Ohjeet eivät ole kattavia. Tämän tuotteen turvallinen ja asianmukainen käyttö on yksinomaan käyttäjän harkinnan varassa. Turvallisuustiedot sisältyvät käyttäjän palveluun. Kaikkien muiden käyttäjän toteuttamien toimenpiteiden tulee olla voimassa olevien määräysten mukaisia ja niiden tulee olla niiden mukaisia. On suositeltavaa antaa koulutusta tuotteen asianmukaisesta käytöstä ennen tämän tuotteen käyttöä todellisessa tilanteessa.

Säilytä tämä käyttöopas myöhemmää tarvetta varten. Sisällytä se tuotteeseen, jos se siirretään uusille käyttäjille. Muita ilmaisia kopioita on saatavilla osoitteessa Asiakaspalvelun pyyntö.

Omistusoikeusilmoitus

Tässä käsikirjassa paljastetut tiedot ovat TraverseRescue, LLC: n, Mississauga Kanadassa, omaisuutta. Traverse Rescue, LLC. pidättää itsellään kaikki niihin liittyvät patenttioikeudet, omistusoikeusmallit, valmistusoikeudet, jäljentämisen käyttöoikeudet ja myynnin käyttöoikeudet sekä niihin sisältyvät artikkelit paitsi siltä osin kuin nämä oikeudet on nimenomaisesti myönnetty muille tai jos ei koske toimittajan omia osia.

© Tekijänoikeus Traverse Rescue, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään

Traverse Rescue, LLC.
2460 Tedlo-katu
Mississauga, Ontario
Kanada L5A3V3

Puhelin: 905 279 7866
Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat): 1 866 998 7866
Faksi: 905 615 1199

www.traverserescue.com



Ferno srl
Via B.Zallone, 26
40066 Pieve di Cento, Italia
+ 39 0516860028



Ferno (UK) Limited
Stubs Beck Lane, Cleakheaton
West Yorkshire BD19 4TZ, Iso-Britannia
44 (0) 1274 851999



Traverse Rescue, LLC valmistaa tuotteitamme tiukan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti. Traverse Rescue LLC on ISO 9001: 2015 -sertifioitu yritys.

Traverse Rescue, LLC -tuotteiden CE- ja UKCA-symbolit tarkoittavat, että tämä tuote on sertifioitu Euroopan yhteisön neuvoston direktiivin 93/42 / ETY mukaisesti. Traverse Rescue, LLC vakuuttaa, että tämä tuote on lääkinnällinen laite ja täyttää EY-asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

Traverse Rescue, LLC: n valmistamat Mule II Rescue -kuljetusalusta on määritetty luokan 1 laitteiksi.

1. Turvallisuustiedot

1.1 Varoitukset

Seuraavassa on tämän käsikirjan varoituksia:

!!! VAROITUS !!!

Koulutukseton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Salli vain koulutetun henkilöstön käyttää Mule II: ta.

*

Mule II: n väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä Mule II: ta vain tässä käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen

*

Rajoittamaton tai väärin pidetty potilas voi kärsiä loukkaantumisista. Kiinnitä potilas aina Mule II: een tilanteen mukaisella turvajärjestelmällä

*

Väärä käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä Mule II: ta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla

*

Potilas, jota ei ole hoidettu, voi loukkaantua. Pysy potilaan kanssa aina

*

Auttajat voivat aiheuttaa vammoja tai loukkaantua. Säilytä Mule II: n hallinta ja ohjaa kaikki avustajat

*

Väärä huolto voi aiheuttaa vammoja ja vahinkoja. Ylläpidä Mule II: ta vain tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla

*

Väärät osat ja huolto voivat aiheuttaa vammoja. Käytä Mule II: ssa vain Traverssin hyväksymiä osia ja huoltoa

*

Mule II: n muokkaaminen voi aiheuttaa vammoja. Käytä Mule II: ta vain Traversen myymänä.

*

Sopimattomien tai sopimattomien esineiden kiinnittäminen Mule II -laitteeseen voi aiheuttaa loukkaantumisen. Käytä Mule II: ssa vain Traverse-hyväksytyjä tuotteita. *

1.2 Tärkeää

Alla olevan kaltaiset laatikot korostavat tärkeitä tietoja.

TÄRKEÄ

Köysiä, valjaita, suitset ja muita henkilökohtaisia suojarusteita käyttävät pelastusmenettelyt vaativat erityisosaamista ja ovat mahdollisesti vaarallisia toimintoja. Pelastushenkilöstön ei pitäisi yrittää tällaisia pelastusmenettelyjä, ennen kuin he ovat saaneet ammattitaitoista opastusta ja koulutusta.

1.3 Veren kautta tarttuvaa tautia koskeva ilmoitus

OSHA (työturvallisuus- ja työterveyshallinto) vaatii työnantaja suojelemaan työntekijöitä altistumiselta työpaikalla veressä tarttuville sairauksille, kuten HIV-1 ja hepatiitti. Noudata tämän käsikirjan desinfiointi- ja puhdistusohjeita altistumisriskin vähentämiseksi Mule II -laitetta käytettäessä.

1.4 Turvatarrat

Tarrat sijoittavat tärkeät tiedot käyttäjän käsikirjasta muuliin II.
Lue etiketin ohjeet ja noudata niitä. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet tarrat välittömästi. Uusia tarroja on saatavana Traversesta.
Esitetty Load-Limit-tarra on kiinnitetty kuljetusalusta runkoon.



2. Työntekijän taidot ja koulutus

2.1 Taidot

Mule II: ta käyttävät tarvitsevat:
Toimiva tieto potilaiden hätätilanteiden käsittelymenettelyistä.
Kyky auttaa potilasta.
Täydellinen käsitys tässä kuvatuista menettelyistä manuaalinen.

2.2 Koulutus

Työntekijöiden on:

Noudattaa esimiesten suunnittelemaa tai hyväksymää

koulutusohjelmaa

Lue tämä käyttöopas. Saat lisää ilmaisia käyttäjien käsikirjoja ottamalla

yhteyttä Traverseen

Asiakaspalvelu.

Harjoittele Mule II: n kanssa ennen kuin käytät sitä säännöllisesti

Testataan heidän ymmärryksestään mule II: sta

Kirjaa heidän koulutustietonsa. Esimerkkikoulutusaiakataulu ja

Huoltotiedot toimitetaan (**Sivu 9**)

3. Tietoja mule:sta II

3.1 Mule II Kuvaus

Mule II on suunniteltu kuljettamaan useimpia pelastuspaareja tai rankalautoja epätasaisessa maastossa hätäaputoimien aikana.
Mule II on tarkoitettu koulutetun pelastushenkilöstön käyttöön.
Vähintään kaksi henkilöstöä tarvitaan Mule II: n käyttämiseen potilaan kuljetuksessa, mutta lisäapua saatetaan tarvita tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa. Mule II: n ominaisuuksia ovat:

- Suunnittelu sopii kaikkiin Traverse Rescue tuotteisiin ja useimpiin pelastuspaareihin
- Pyörä voidaan poistaa nopeasti säilytystä tai kuljetusta varten runko
- Suuret mönkijän telat kulkevat hyvin kaikenlaiseen maastoon ja vaimentavat iskuja potilaan mukavuuden takaamiseksi
- Kiinnityshihnapari käyttää räikkäsolkia nopeaan ja tiukkaan pitoon, ja vinyylipinnoitetut koukut
- Valinnaiset kahvat tarjoavat paremman hallinnan

3.2 Yleiset tiedot

Muuli II (käytössä)		
Pituus	33 tuumaa	84 cm
Leveys	26 tuumaa	66 cm
Syvyys	29 tuumaa	74 cm
Syvyys (tallennettu)	19 tuumaa	48 cm
Paino	36 paunaa	16 kg
Nimelliskuormitusraja	500 paunaa	227 kg

Muuli II kahvoilla (käytössä)		
Pituus	96 tuumaa	244 cm
Pituus (tallennettu)	33 tuumaa	66 cm
Leveys	27,5 tuumaa	70 cm
Leveys (tallennettu)	32 tuumaa	81 cm
Syvyys	29 tuumaa	74 cm
Syvyys (tallennettu)	19 tuumaa	48 cm
Paino	46 paunaa	21 kg
Nimelliskuormitusraja	500 paunaa	227 kg

Rakentaminen

Runko Alumiiniakseli

Alumiiniakseli 3/4 tuumaa.

Ruostumaton

teräsrengas AT 22x11-8

Käytä enintään 10 psi: n paineella



Tekniset tiedot pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Metriset muunnokset lasketaan ennen Imperial-mittausten pyöristämistä. Traverse pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

!!! VAROITUS !!!

Koulutukseton käyttäjä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai loukkaantua. Salli vain koulutetun henkilöstön käyttää Mule II: ta.

3.3 Komponentit

Mule II

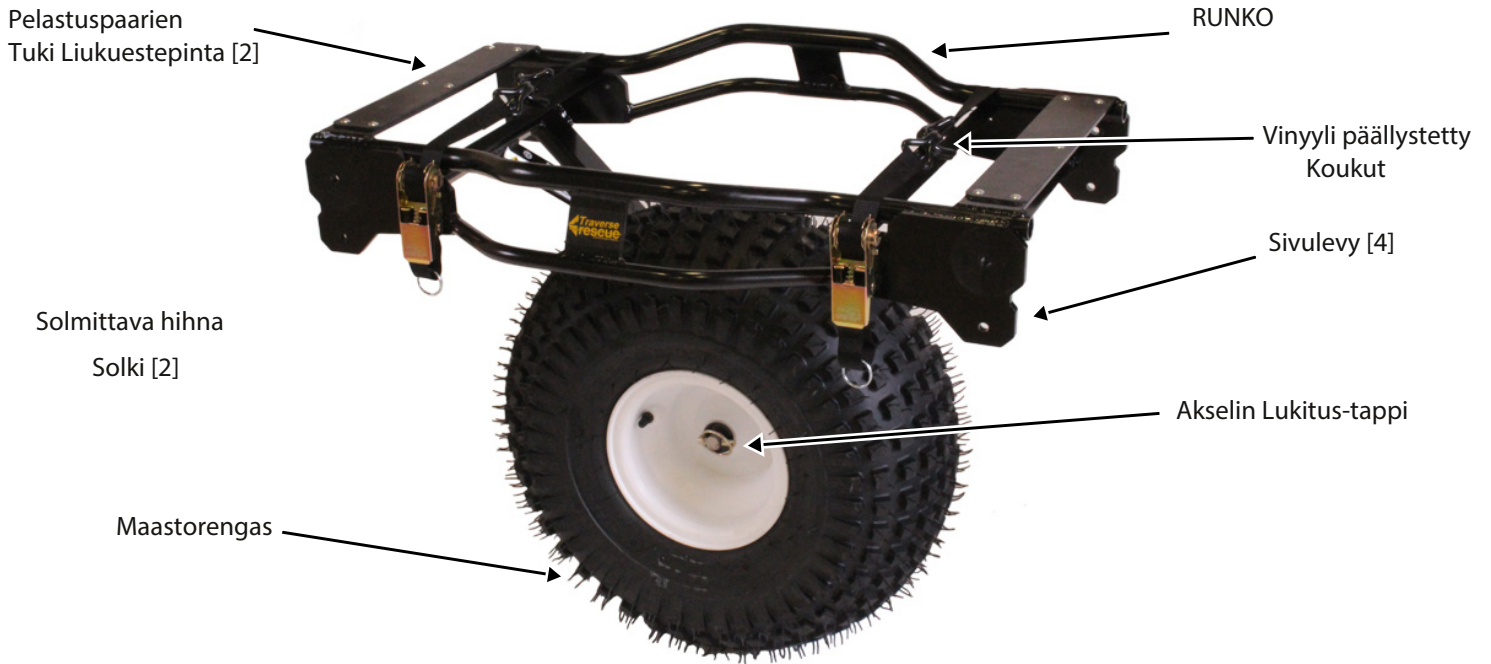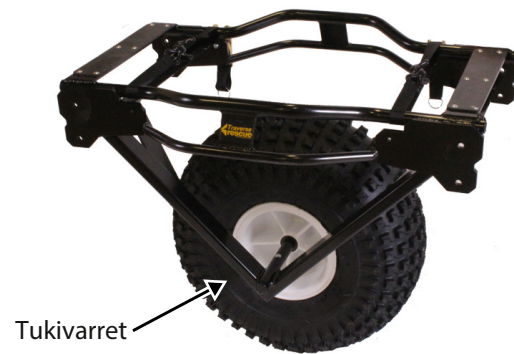Mule II
(kääntöpuoli)


Mule II kahvoilla



4. Kiinnittimien käyttö

4.1 Räikkäsoljet

Mule II on varustettu kahdella kiinnityshihnalla, joihin on asennettu räikkäsoljet (kuva 1), jotta pentue voidaan kiinnittää Mule II:een.

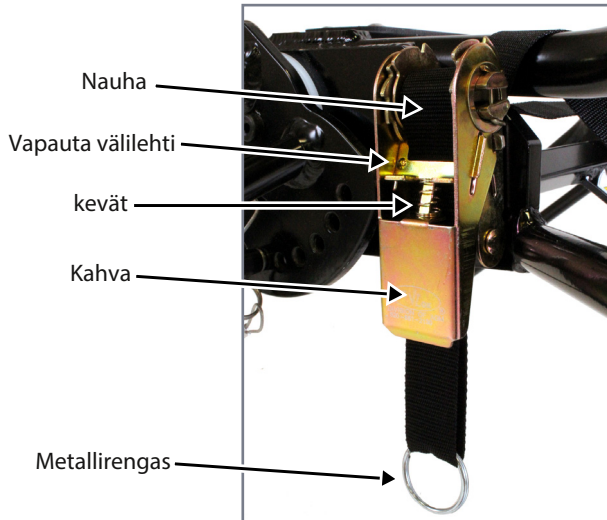

Kuva 1. Räikkälukon osat

4.2 Hihnan kireyden vapauttaminen

1. Paina ja pidä vapautuskielekettä auki ja avaa kahva kokonaan, kunnes se napsahtaa kiinni. Tämä ohittaa räikkätoiminnon (kuva 2).




Kuva 2. täysin auki oleva kahva

2. Vedä hihna telan läpi löysäksi, pidä sitten vapautuskielekettä painettuna ja sulje kahva vapauttaaksesi pidätyksestä.

4.3 Hihnan kiristäminen

Työnnä kahvaa ylös ja alas, kunnes hihna on kiristetty kunnolla kuorman kiinnittämiseksi, ja

sulje sitten kahva kokonaan hihnan lukitsemiseksi ja pitämiseksi kiinni (kuva 3).

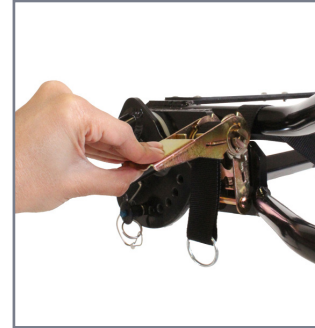


Kuva 3. Työnnä kahva ylös ja alas kireyteen

4.4 Pyörän lenkitappi

Pyörä on kiinnitetty akselille uralla. Tapin itselukittuva rengas napsahtaa paikalleen pitämään kokoonpanoa tukevasti ja mahdollistaa myös nopean irrotuksen. Käytä lukitus-tapia alla olevan kuvan mukaisesti.

1. Liu'uta lukitusosan-tappi akseliin (kuva 4).
2. Lukitse kääntörenkas tapia vasten

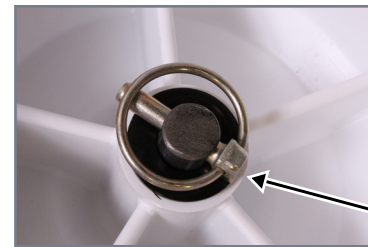

Lukitusoska

Kuva 4. Lukitusosan-tappi akselissa

4.5 Pikalukitustappi kahvan säätämistä varten

Kahvat (valinnainen ominaisuus) säätävät 8 asentoon. Pikalukitustappi kiinnittää kahvan valittuun asentoon (kuvat 5 ja 6).



Kuva 5




Kuva 6

5. Käyttöönotto ja erittely


5.1 Käyttöönotto ilman kahvoja

1. Aloita Mule II säilytysasennossa ja poista linja-akseli akselistä (kuva 7).

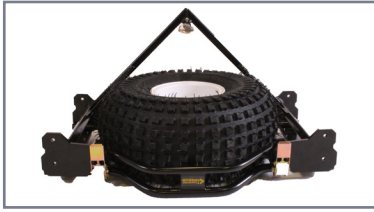


Kuva 7

2. Nosta pyörä ulos telineestä ja liu'uta akselille siten, että ilmaventtiili on pois päin pääkehysten tukeista (kuva 8).

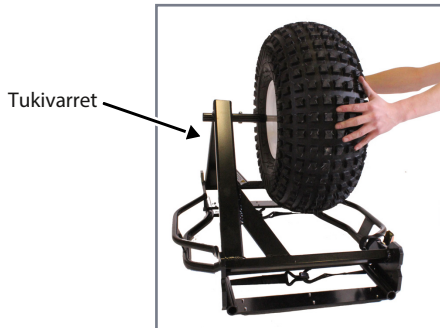

Kuva 8. Aseta pyörä akselille

3. Kiinnitä pyörä akselille lukitustapilla (kuva 9).

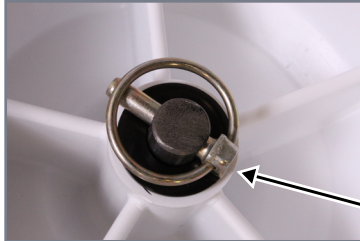

Kuva 9. Lynch-tappi akselissa

4. Käännä Mule II pystyssä pyörälle (kuva 10).



Kuva 10

5.2 Käyttöönotto kahvoilla

1. Aloita Mule II:n säilytysasennossa ja poista vinttappi akselistä (kuva 11).



Kuva 11

2. Avaa yläkahva ja lukitse paikalleen pikalukitustapilla (kuva 12).




Kuva 12

3. Nosta pyörä ulos telineestä ja liu'uta akselille siten, että ilmaventtiili on pois päin pääkehysten tukeista (kuva 13).



Kuva 13

4. Kiinnitä pyörä akselille lukitustapilla (kuva 14).

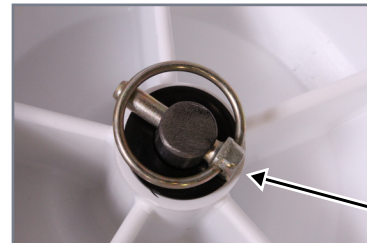

Kuva 14. Lukitussokan-tappi akselissa

5. Käännä Mule II pystysuoraan pyöräänsä (kuva 15).



Kuva 15

6. Avaa toinen kahva ja lukitse paikalleen pikalukitustapilla (kuva 16).



Kuva 16

5.3 Säilytykseen laitto ilman kahvoja

1. Kiinnitä hihnakoukut Mule II:n päälle ja kiristä hihnat tiukasti runkoa vasten (kuva 17).



Kuva 17

2. Käännä Mule II ylösalaisin (kuva 18).




Kuva 18

3. Irrota lukitustappi ja liu'uta pyörä akselilta (kuva 19).



Kuva 19

4. Pesäpyörä kehikkotelineessä ja työnnä lukitustappi akselille ja lukitse (kuva 20).

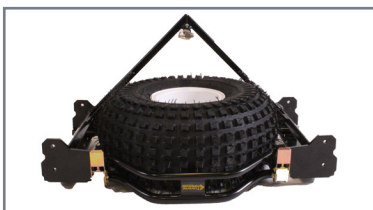

Kuva 20

5.4 Hajota kahvoilla

1. Kiinnitä hihnakoukut Mule II:n päälle ja kiristä hihnat tiukasti runkoa vasten (kuva 21).



Kuva 21

2. Poista pikalukitustappi kahvasta ja taita kahva Mule II:n päälle (kuva 22).



Kuva 22

3. Käännä Mule II ylösalaisin ja poista sitten vinnstappi ja liu'uta pyörä akselilta (kuva 23).



Kuva 23

4. Pesäpyörä kehikkotelineessä liu'uta lukitustappi takaisin akseliin ja lukitse (kuva 24).



Kuva 24

5. Poista pikalukitustappi toisesta kahvasta ja taita kahva Mule II-akselin päälle (kuva 25).



Kuva 25

6.0 Kiinnittäminen mule II:n

Suurin osa pelastuspaareista, rankalaudoista ja voidaan kiinnittää Mule II:een. Kiinnitä hihnakoukut asianmukaiseen kiskoon, kädensijoihin tai muuhun rungon osaan.

Tarvittaessa hihnoja voidaan käyttää täyspitkäänä ja kääriä pelastuslaitteen alle ja päälle (kokonaan sen ympärille). Koukut liitetään sitten ja hihnat kiristetään pitämään laitetta tiukasti tukia vasten.

1. Vapauta hihnojen ja erillisten koukkujen jännitys.
2. Aseta pelastusjätteet Mule II:lle ja keskitä se pyörän yli.
3. Kiinnitä kaikki 4 koukua pelastusjätteen yläkiskoon.
4. Kiristä molempia hihnoja, kunnes pelastusjätteet ovat tiukasti pelastusjätteen tukia vasten.
5. Varmista, että räikän kahvat ovat kiinni.

7. Korjaus, osat ja huolto

Jos Mule II: ssa on liiallista kulumista tai halkeamia (joko materiaalissa tai hitsissä), on aika poistaa se käytöstä. Älä yritä korjata tai vaihtaa mitään metalliosia tai hitsiaineita.

Jos pyörä, hihnat, tarrat tai kahvat ovat vaurioituneet tai puuttuvat, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Traverse Rescue -asiakaspalveluun varaosien saamiseksi.

Noudata aina lisävarusteiden mukana toimitettuja ohjeita. Säilytä tämän käyttöohjeen ohjeet. Ole tietoinen kaikista erityisistä näkökohdista (lastauskorkeudet, oven korkeudet jne.)

Osa numero	Kuvaus
11-1114	Vaihtopyörä
06-0174	Lynch Pin
11-0224	Vaihtokahva (kummatkin)
04-0127P	Kiinnityshihnat koukkuilla (pari)
04-0129P	Kiinnityshihnat koukkuilla, S: llä (pari)

8. Rajoitettu takuu

Traverse Rescue, LLC (Traverse) Rajoitetun takuun mukaan kaikilla Traverse-tuotteilla on alkuperäisen ostajan takuu yhden vuoden ajan laskutuspäivästä. Tämä takuu on annettu materiaali- tai valmistusvirheitä tai vikoja vastaan. Jos tämän takuuajan aikana ilmenee tällainen vika, ota välittömästi yhteys Traverse Rescueen. Traverse Rescue, LLC sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan viallisen tuotteen (valintamme mukaan). Rajoitettu takuumme ei kata väärinkäytöstä, väärinkäytöstä, hoidon puutteesta, väärästä käytöstä tai onnettomuuksista johtuvia vahinkoja. Se ei myöskään korvaa vahinkoja, jotka johtuvat ostajan korjausyrityksestä, jota Traverse Rescue, LLC ei ole valtuuttanut. Traverse Rescue, LLC ei esitä muita takuita. Tämä rajoitettu takuu ei sulje pois, eikä Traverse ole vastuussa mistään rankaisevasta, satunnaisesta, erityiset tai esimerkilliset vahingot, jotka johtuvat Traversen tai muuten tapahtuvan myynnin takuun rikkomisesta tai kolmannen osapuolen osan, tuotteen, palvelun tai järjestelmän suorittamisesta tai laiminlyönnistä. Tämä rajoitettu takuu ei rajoita millään tavalla eikä muuta millään tavalla muiden valmistajien takuita tuotteille, joita Traverse Rescue, LLC myy.

9. Käy läpi asiakaspalvelua

Asiakaspalvelu ja tuotetuki ovat tärkeitä näkökohtia jokaiselle Traverse-tuotteelle.

Ota yhteyttä Traversen asiakaspalveluun saadaksesi apua tässä tai muussa Traverse-tuotteessa.

Ole hyvä ja pidä Traverse-pelastuspäilyksen sarjanumero saatavilla, kun soitat Traverse-asiakaspalveluun, ja lisää tämä numero kirjalliseen viestiin.

Traverse Rescue, LLC.

2460 Tedlo-katu
Mississauga, Ontario
Kanada L5A 3V3

Puhelin 905 279 7866

Maksuton (Kanada ja Yhdysvallat) 1 866 998 7866

Faksi 905 615 1199

Sähköposti info@traverserescue.com

Verkkosivusto www.traverserescue.com



